



WOLTURNUS

# Basket

Starrrahmen-Rollstuhl  
für Basketball



Sebastian Magenheim in vollem Einsatz mit seinem Wolturnus Basket. Copyright: Jürgen Berg

# Wolturnus Basket

## stabil, leicht und extrem wendig

Der Wolturnus Basketball-Rollstuhl ist ein Sport-Rollstuhl der Spitzenklasse. Er zeichnet sich durch extrem gutes Fahrverhalten aus, ist äußerst strapazierfähig, sehr leicht, sehr gut anpassbar und entsprechend den internationalen Richtlinien konzipiert.

Der Wolturnus Basketball-Rollstuhl wurde in Zusammenarbeit mit internationalen Topspielern konzipiert und optimiert.

Der Rahmen besteht aus gehärtetem Aluminium 7020, der stärksten schweißbaren Aluminiumlegierung.

Das Ergebnis ist ein erstklassiger Sport-Rollstuhl mit übertragender Stabilität und geringem Gewicht. Der Wolturnus Basket garantiert daher ein extrem gutes Fahrverhalten, so dass du mit ihm schneller beschleunigen und die Richtung wechseln kannst als deine Gegner.

Die Geometrie des Rahmens wird deiner Körpergröße, Kraft und Spielposition exakt angepasst. Es besteht die Möglichkeit zwischen einer festverschweißten oder einer einstellbaren Antriebsachse zu wählen. Mit entsprechender Ausstattung kann der Basket nachträglich in Sitzbreite, Sitztiefe, Rücken- höhe, Fußstützenhöhe und Seitenteilhöhe angepasst werden.

Das Eloxieren des Rahmens resultiert in einer harten, widerstandsfähigen Oberfläche, die keinerlei Pflege bedarf.

### Eigenschaften

- › Standardmodelle sowie maßgefertigte Modelle
- › Design, Maße und Ausstattung entsprechen den internationalen Richtlinien
- › Hohe Stabilität und geringes Gewicht
- › Extrem wendig und leicht zu beschleunigen
- › An Spielposition angepasstes Design
- › Achsposition der Antriebsachse verschweißt oder einstellbar
- › Adaptierbarkeit bei Wachstum
- › Korrosionsbeständiger, schlagfester Rahmen
- › Dänisches Design, dänische High-End Qualität
- › Kurze Lieferzeiten




#### › MASSANFERTIGUNG

Maßgefertigter Basketball-Rollstuhl für den geübten Nutzer: vollverschweißte oder mit vielfachen Einstellmöglichkeiten erhältlich



#### › ACHSPOSITION

Wahlweise festverschweißte oder einstellbare Achsposition der Antriebsräder

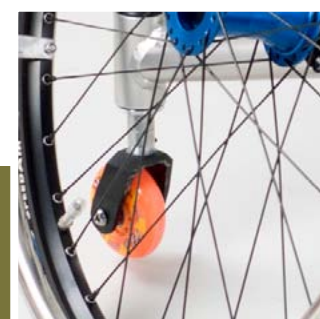

#### › KIPPSCHUTZ

Beidseitiger Kippschutz ermöglicht maximale Stabilität auf dem Spielfeld