



WOLTURNUS

# Dalton

Starrrahmen-Rollstuhl mit  
multifunktionaler Fußstütze



# Funktionell und vielseitig

Der Dalton ist ein Starrrahmen-Rollstuhl für den aktiven Nutzer, der eine vielseitig einstellbare Fußstütze wünscht.

Der Dalton verfügt über eine geteilte, hochklappbare, winkel- und höhenverstellbare Fußstütze. Die zusätzliche Wegschwenk-Funktion ermöglicht einen einfachen und sicheren Transfer in und aus dem Rollstuhl. Bei Bedarf können diese außerdem mit einem einfachen Handgriff komplett abgenommen werden.

Sollte eine einseitige oder beidseitige Hochlagerung der Beine gewünscht werden, kann der Dalton auch mit einer Beinstütze mit Anhebefunktion ausgestattet werden.

Das Dalton-Modell ist eine Maßanfertigung – dem Aktivitätslevel, der Körpergröße sowie Kraft des individuellen Nutzers angepasst. Das klassische Modell kann bis zu einem Nutzergewicht von 160 kg eingesetzt werden. Für besonders stark gebaute Nutzer gibt es die Möglichkeit den Dalton in einer extra verstärkten Version anzufertigen. Dies führt zu einem maximalen Nutzergewicht von bis zu 250 kg. Für Nutzer bis 80 kg ist der Dalton Light in einer Sonderanfertigung mit schlankeren Rahmenrohren eine tolle, elegante Alternative zum klassischen Modell.

Bei Wahl eines stufenlos einstellbaren Balancepunktes sowie einem winkel- und höhenverstellbaren Faltrücken, können Sie die Sitzposition kontinuierlich anpassen. Alternativ ist der Dalton voll verschweißt erhältlich.

Der Dalton kann auch mit einer geringen Sitzhöhe angefertigt werden. Der sogenannte Dalton L eignet sich somit besonders für Nutzer, die mit ihrem Rollstuhl selbst vorwärtsgehen möchten.


## Eigenschaften

- › Geteilte, hochklappbare, winkel- und höhenverstellbare Fußstützen
- › Wegschwenkbare Beinstützen
- › Beinstützen mit Anhebefunktion
- › Abnehmbare oder fixierte Seitenteile
- › Winkel- und höhenverstellbarer Faltrücken (optional)
- › Erhältlich mit Wing Back ILSA
- › Erhältlich mit geringer Sitzhöhe (Dalton L)
- › Rahmen aus Aluminium 7020
- › Gesamtgewicht ab 10 kg
- › Nutzergewicht bis max. 160 kg (250 kg)



### › FUSSSTÜTZE

Geteilte, hochklappbare, winkel- und höhenverstellbare Fußstütze. Die Wegschwenk-Funktion ermöglicht einen einfachen Transfer.

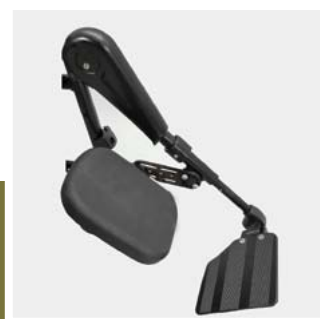

### › BEINSTÜTZE MIT ANHEBEFUNKTION

Wählen Sie eine Beinstütze mit Anhebefunktion zur Hochlagerung der Beine.



### › DALTON LIGHT

Beim Dalton Light werden schlankere Rahmenrohre verwendet. Dies verleiht diesem Modell einen eleganten, leichten Look. Nutzergewicht bis 80 kg.