



WOLTURNUS

HAWK

Aktiv leben





HAWK

Dein Leben. Deine Entscheidungen

DER HABICHT

Der Habicht ist ein schneller, mittelgroßer Greifvogel, der nur selten für längere Zeit still sitzt. Er ist ein kräftiger Vogel, mit relativ kurzen, breiten Flügeln und einem langen Schwanz. Habichte werden oft in Bodennähe gesichtet, sie gleiten jedoch auch hoch oben durch die Lüfte.





HAWK

Der HAWK wurde für die ultimative Entfaltung in allen Lebenslagen entwickelt. Ein kompakter, robuster und einzigartiger Starrrahmen-Rollstuhl mit bestechenden Fahreigenschaften und einer Vielzahl von Einstellmöglichkeiten. Ein Rollstuhl, der den Vorstellungen und Herausforderungen eines jeden aktiven Rollstuhlnutzers angepasst werden kann.

DEIN HAWK - DEIN LEBEN

Deine Entscheidungen. Deine Bedürfnisse

Der HAWK wurde so entwickelt, dass er sich gemäß deinen Vorstellungen anpassen lässt - seien es die Zubehör-Wünsche, die ideale Sitzposition oder dein persönlicher Geschmack.

Der HAWK ist ein sowohl eleganter, als auch praktischer Rollstuhl, der die Herausforderungen des Alltags meistert und sich deiner Lebenssituation entsprechend angleichen lässt. Dies macht den HAWK zu einem Hilfsmittel für jeden, der nach einem Rollstuhl für den täglichen, aktiven Gebrauch aus ist.

Dein HAWK ist einzigartig! Du kannst ihn durch die Rahmen- und Komponenten-Farben deinen Wünschen entsprechend gestalten. Dein HAWK ist keineswegs ein Standardrollstuhl - er ist dein verlässlicher Begleiter in allen Lebenslagen.



ZAHLEN UND FAKTEN:

- › Aktiv-Starrrahmen-Rollstuhl
- › Boxrahmen aus 7020 Aluminium
- › Pulverlackierter Rahmen
- › Ergonomischer Sitz
- › Farbenreiche Komponenten
- › Durch Gurte individuell anpassbare Sitz- und Rückenbespannung
- › Einstellbare Sitzhöhe und -tiefe
- › Faltrücken mit einstellbarem Rückenwinkel
- › Gewicht ab 7 kg
- › Maximale Steigung, mit Feststellbremsen: 7°
- › Nutzergewicht bis maximal 120 kg
- › Einfaches Verstauen im Auto
- › CE-Kennzeichnung & TÜV-Zertifizierung



ALLE INFORMATION SIND AUCH AUF UNSERER HOMEPAGE ZU FINDEN
WOLTURNUS.DE



Das Beste an meinem Wolturnus Rollstuhl ist, dass ich manchmal vergesse, dass es ihn gibt.



EIN ROLLSTUHL, DER EINFACH **IMMER PASST**

Der HAWK ist der richtige Rollstuhl für alle aktiven Nutzer, die sich einen einstellbaren Rollstuhl für den täglichen Gebrauch wünschen. Dieser Rollstuhl wird gemäß deinem Körperbau angepasst geliefert, lässt sich jedoch jederzeit vielseitig neu einstellen.

Der HAWK verfügt über einen einstellbaren Balancepunkt, eine einstellbare Sitzhöhe und -tiefe, sowie durch Gurte individuell anpassbare Sitz- und Rückenbespannung. Außerdem lassen sich sowohl der Rückenwinkel, als auch die Rückenhöhe individuell einstellen.



EINZIGARTIGES DESIGN

Die Eigenschaften des HAWK sind einmalig und in einem eleganten, praktischen und robusten Design vereint.



» BOX-RAHMEN

Der aus 7020-Aluminium hergestellte Boxrahmen vereint optimale Festigkeit und Stabilität mit elegantem und modernem Design.



» DIBOND SEITENTEILE

Abnehmbare Dibond-Seitenteile lassen sich im Handumdrehen entfernen.



» EINSTELLBARE FUSSPLATTE

Ultraleichte und elegante Fußplatte, deren Höhe und Winkel verstellbar sind. Standardmäßig mit rutschfestem Belag.



» FALTRÜCKEN

Ein speziell entwickelter Faltrücken mit Arretierungsmechanismus. Dies erleichtert das Ein- und Ausladen des Rollstuhls beim Transport mit dem Auto.



» ERGONOMISCHER SITZ

Der ergonomische Sitz, in Kombination mit der durch Gurte verstellbaren Rücken- und Sitzbespannung, sorgt für bessere Körperhaltung, Balance, Stabilität, Druckverteilung und Fortbewegung.



» KNIEHEBELBREMSE (PUSH-TO-LOCK)

Als Standard-Ausführung ist der HAWK mit Kniehebelbremsen ausgestattet.

DEIN HAWK 100% DEINE WAHL

Designe deinen individuellen HAWK mit dem Zubehör deiner Wahl.


Dies ist nur eine kleine Auswahl der unzähligen Möglichkeiten, die du bezüglich der Wahl des Zubehörs für deinen einzigartigen HAWK hast.

>> Auf der letzten Seite dieser Broschüre findest du sämtliche Alternativen zur Standardkonfiguration, sowie alle Zubehör-Wahlmöglichkeiten.



› FARBENREICHE KOMPONENTEN

Wähle zwischen 7 verschiedenen Komponenten-Farben für Vordergabeln, Seitenteil-Halter, Rückenbeschläge und Fußstützen-Rohre

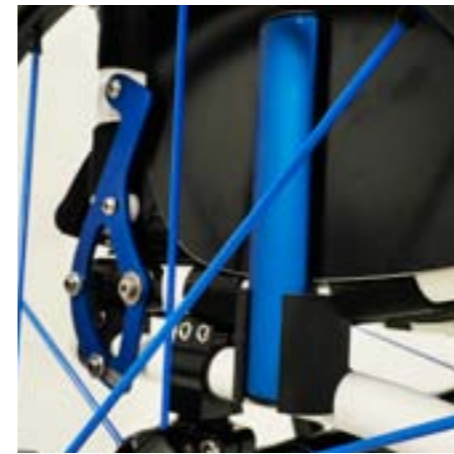

› FIBERPLAST BREMSEN

Ultraleichte Scheren-Bremsen vermeiden zusätzliches Gewicht



› SPINERGY ANTRIEBSRÄDER

Spinerger-Antriebsräder in 8 verschiedenen Farben.



› CURVE GREIFREIFEN

Spezielle Greifreifen mit ergonomisch-optimiertem Profil




› WING BACK ILSA

Einzigartiges, mehrfach einstellbares Rückensystem ermöglicht ein kontinuierliches Anpassen der Sitzposition



› SCHIEBEGRIFFE

Stufenlos höhenverstellbare Schiebegriffe mit gummiertem Überzug

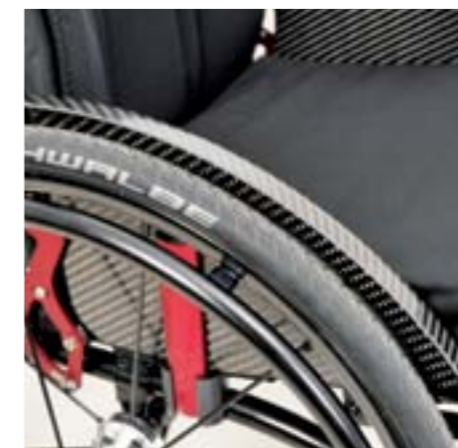

› CARBON SEITENTEILE

Abnehmbare oder faltbare Seitenteile aus Carbon, mit oder ohne Kleiderschutz

JUST IN TIME

Der HAWK ist leicht in der Handhabung und einfach zu bestellen. Obwohl du deinen HAWK gemäß deinen persönlichen Vorstellungen und Bedürfnissen selbst zusammenstellst, hast du keine langen Wartezeiten zu befürchten.

Bestelle deinen HAWK in nur 5 Schritten

- 1 Kontaktiere den Wolturnus-Berater/-Händler deines Vertrauens
- 2 Lass dir dabei helfen, die Sitzbreite, sowie andere wichtige Maße zu bestimmen
- 3 Wähle dein gewünschtes Zubehör
- 4 Dein Berater/Händler schickt das ausgefüllte Bestellformular an Wolturnus
- 5 Dein HAWK wird dir von deinem Wolturnus-Berater / Händler innerhalb von ca. 2 Wochen zur Verfügung gestellt



EIN LEBEN IN BEWEGUNG

Der HAWK lässt sich leicht auseinandernehmen und eignet sich daher gut für den Transport. Die Faltrücken-Arretierung wird aktiviert sobald der Faltrücken nach unten geklappt wird. Mithilfe des ergonomischen Griffs am Rückenrohr, lässt sich der Rollstuhl somit im Handumdrehen verladen.



Technische Daten

Maße	SB 350	SB 375	SB 400	SB 425	SB 450	SB 475	SB 500
Sitzbreite (SW) (mm)	350	375	400	425	450	475	500
Gesamtweite (TW) (mm)	515	540	565	590	615	640	665
Sitzhöhe (SH) vorne (mm)	460-520	460-520	460-520	460-520	460-520	460-520	460-520
Sitzhöhe (SH) hinten (mm)	390-480	390-480	390-480	390-480	390-480	390-480	390-480
Rückenhöhe (BH) (mm)	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500



ALLE INFORMATION SIND AUCH AUF UNSERER HOMEPAGE ZU FINDEN
WOLTURNUS.DE

Technische Daten Standard Konfiguration Alternativen / Zubehör

Rahmen

Gesamtbreite	Sitzbreite +19 cm bei 1° Sturz	
Sitzbreite	35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5 oder 50 cm	
Sitztiefe	35-41 / 39-45 / 43-50	
Balancepunkt	Stufenlos einstellbar, zwischen 2 und 9 cm	
Sitzhöhe vorne/hinten	48/42 cm	einstellbar zwischen 46-52 cm / 39-48 cm
Vorderrahmen	UV-Form	
Unterbeinlänge	Einstellbar 39-45 cm (std.)	einstellbar zwischen 36-50 cm
Fußplatte	Winkelverstellbar, 15 cm tief, gummiert	
Fußstütze	stufenlos höhenverstellbar	
Schiebegriffe	Keine	Höhenverstellbare oder faltbare Schiebegriffe
Bremsen	Kniehebelbremse (push-to-lock)	Kniehebelbremse (push-to-lock) mit gebogenem Griff, Fiberplast-Bremse (push-to-lock), Scherenbremse, Scherenbremse (Fiberplast), Bremshebelverlängerung
Kippschutz	Keiner	Wing Anti-tipper
Farbe	Pulverlackierter Rahmen, weiß, schwarz oder silber	
Komponenten-Farben	Lila, grün, rot, blau, gold, silber, schwarz	
Farbige Komponenten	Vordergabeln, Seitenteil-Halter, Rückenbeschläge und Fußstützen-Rohre	

Räder

Hinterrad	24" (Kreuz-) Speichenrad mit Quick-Release-Achsen	22" / 25": (Kreuz-) Speichenrad 24" / 25" Spinerger (12/18 Speichen - schwarz/weiß/blau/gelb/rot/orange/pink/grün)
Greifreifen	24" Aluminium, silber eloxiert	22" / 25" Aluminium, silber eloxiert 22" / 24" / 25": Titan, Friktion, Surge LT, Plastik, Edelstahl, Maxgrepp Ergo Para, Curve L TG, B-Braver
Bereifung	24" Standard-Bereifung grau	22" / 25" Standard-Bereifung grau. 24" PU-Bereifung (grau), 22" / 24" / 25" Schwalbe Marathon Plus (schwarz) 24" / 25" Schwalbe Marathon Plus (grau)
Radsturz	3°	1°
Vorderräder	4"/34mm Fiberplast Vorderräder (schwarz, blau/rot/weiß/silber)	5" und 6" Fiberplast Vorderräder (schwarz) 4" / 5" Frog Legs (Aluminium) in versch. Farben, 6" schwarz
Speichenschutz	Keiner	22" / 24" / 25" transparent

Positionierung

Rückenrahmen	Faltbar mit Rückenarretierung, höhenverstellbar 35-40 cm (std.) einstellbarer Winkel ±4°	höhenverstellbar zwischen 30-50 cm Wing Back ILSA (3,5, 7cm)
Sitzrahmen	Ergonomischer Sitz	
Durch Gurte einstellbare Sitzbespannung	Schwarze Nylonbespannung, einstellbare Sitztiefe	
Durch Gurte einstellbare Rückenbespannung	Schwarzer, zwei-lagiger Überwurf mit Schaumstofffüllung, atmungsaktiv	
Seitenteile und Armlehne	Faltbare oder abnehmbare Dibond-Seitenteile	Carbon mit Kleiderschutz (abnehmbar), Carbon ohne Kleiderschutz (abnehmbar, faltbar), ABS-Seitenteile mit Armlehne (abnehmbar), Seitenteile mit Neopren-Kälteschutz



WOLTURNUS