



WOLTURNUS

Raz-AT 600

Bade- og toiletstol
til store brugere




RAZ-AT 600

Udviklet til at imødekomme komplekse behov og høje krav til sikkerhed, funktionalitet og kvalitet

Raz-AT600 – Bade- og toiletstol til store brugere op til 275 kg. Stolen har en forstærket stålramme, 25° tilffunktion, fire låsbare 6" hjul, lethåndterbart bækken og heavy-duty benstøtter.

Stolen kommer endvidere med det specialudviklede tilt-system (Weight Assist Spring System (WASS)), som fås i to vægtklasser og kan justeres efter brugerens vægt og balancepunkt, hvilket gør det lettere for hjælperen at tilte stolen. Derudover er stolen forsynet med trædepedal, som igen gør det lettere for hjælperen at tilte brugeren ved hjælp af benkræfter.

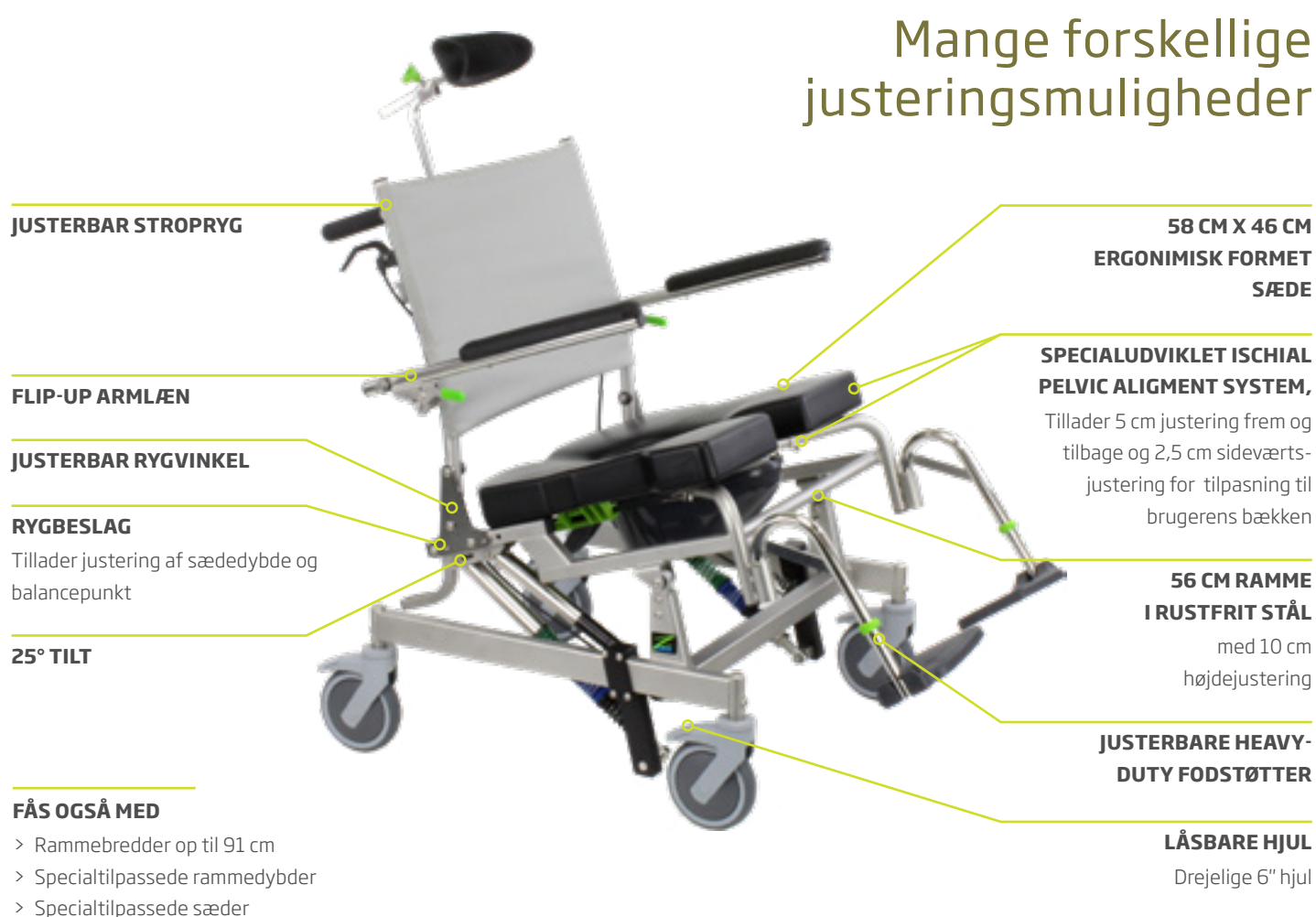

RAZ-AT600 TILBEHØR

- > Ekstra stor hovedstøtte
- > Svingbare armlæn
- > Bodypoint brystsele
- > Bodypoint bækkensele
- > Sæde i viscoelastisk skum
- > Sædekiler til højde- eller vinkeljustering
- > MFX Footrest
- > Retningslås på hjul
- > Flad armlæns pude
- > Formet armlæns pude
- > Brystsele
- > Hoftese
- > Lægrem
- > Hælstropper
- > Kropsstøtter
- > Adduktionsstøtter

RAZ-AT600 EGENSKABER

- > Tilt funktion 25°
- > Trædepedal til tilt
- > Justerbare, forstærkede fodstøtter
- > Ergonomisk sæde
- > Justerbar stropryg
- > Svingbare armlæn
- > Ischial Pelvic Alignment System (IPAS)
- > Justerbar hovedstøtte
- > Bækken
- > Låsbare hjul
- > Skubbehåndtag



TILT FUNKTION

- > Sædetilt for ekstra trykaflastning og komfort
- > Låsbare gasfjeder tillader tilt op til 25°
- > Trykfjedre hjælper med at vinkle ryggen til opretstående stilling
- > Betjeningsvenlig tiltudløser
- > Let og glidende tiltkontrol



TRÆDEPEDAL TIL TILT

- > Hjælperbetjent trædepedal der gør det lettere at tilte tunge brugere
- > Hjælper kan anvende benkræfter til at tilte store brugere.
- > Solid konstruktion i rustfrit stål passer perfekt til rammen
- > Anti-slip overflade



JUSTERBARE FODSTØTTER

- > Aftagelige ved forflytning og rengøring
- > Svingbare
- > Flip-up fodplader
- > Justering af benlængde uden værktøj
- > Fås med længde 40 - 50 cm og til lang underbenslængde 45-56 cm



ERGONOMISK FORMET SÆDE

- > Ergonomisk formet for trykaflastning og bækkensupport
- > Fremstillet i blødt polyurethan med lang holdbarhed
- > Fås med åben forende og let adgang
- > Fås i størrelse SB 58 x SD 46 cm



BÆKKEN

- > Funktionelt bækken til montering under sædet
- > Låg for at forhindre lugt og spild
- > Bredt håndtag med ergonomisk greb
- > Skrå forside skubber bækkenets indhold mod håndtaget og gør den dermed lettere at styre
- > Monteringsbeslag er synligt fra stolens forside og gør det lettere at skubbe bækkenet på plads
- > Passer i standard industri vaskemaskiner



TILPASSET NAKKESTØTTE

- > Hovedstøtten målet ca. 25 x 10 cm
- > Nakkestøttepude i skum er let at rengøre
- > Formet til at støtte hovedet i siderne.
- > Hovedstøtten kan trinløst justeres 13 cm frem og tilbage og 28 cm op og ned
- > Nakkestøtten vinkles til komfortabel vinkel

SPECIFIKATIONER	Raz-AT600
Max brugervægt	275 kg
Rammebredde (sæde- og rygramme)	56 cm
Sædebredde (toiletsæde)	56 cm - 76 cm
Sædedybde	46 cm
Totalbredde (med standard armlæn)	Sædebredde + 11 cm
Totallængde (med fodstøtter)	96 - 99 cm
Frihøjde under sæde	med beslag til bækken: 43 - 48.5 cm uden beslag til bækken: 47.5 - 50 cm
Armlæns højde over side	24 cm
Sæde-til-gulv højde	55 cm and 58 cm
Stolen vejer	5" forhjul 37 kg 6" forhjul 38 kg
Rammemateriale	Rustfrit stål

Alle mål er taget med standard sæde og armlæn



WOLTURNUS